

ALICE-NS(C)系列

调Q纳秒级医美专用 OEM 激光器



特征参数:

- 50 – 800mJ@1064nm / 50 – 400mJ@532nm
- 1 – 10Hz重复频率 / 6ns脉宽
- 结合微光学镜片提供优质的平顶输出
- 紧凑可靠的谐振腔结构确保热稳定性和机械稳定

应用:



- 医疗美容
- 祛斑
- 去纹身
- 皮肤色素治疗

ALICE-NS(C)系列都具有高效的 Nd:YAG 单棒设计, 微光学镜片耦合平顶输出。光学系统和供电系统采用上下分层结构有助于激光器长期的运输稳定性和可靠性。

ALICE-NS (C) 系列

激光头机械规格

单位: mm

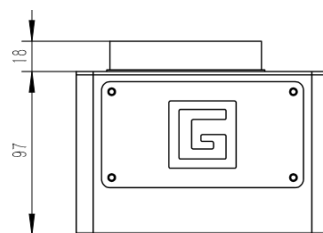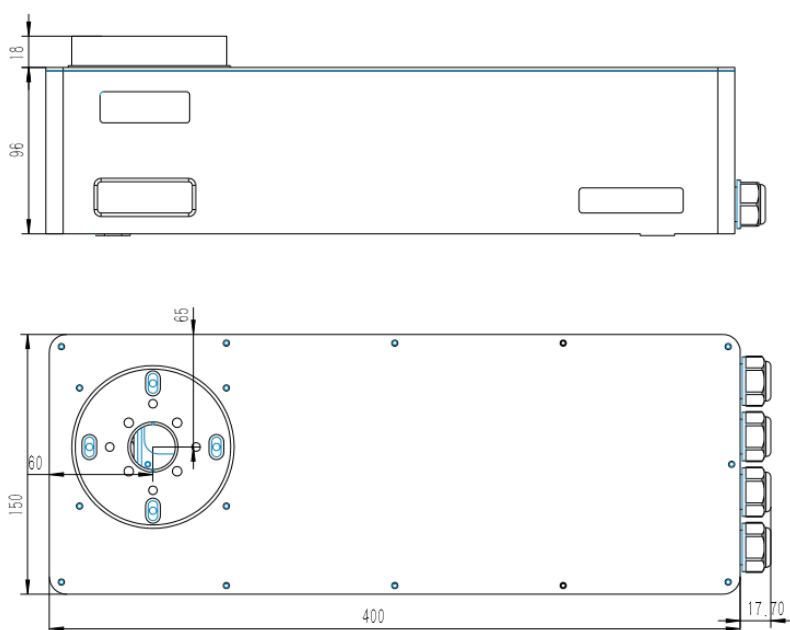

ALICE-NS(C)系列规格



-----调Q纳秒级医美专用 OEM 激光器

光束特性

项目	ALICE-NS(C)	ALICE-NS(C) Pro
重复频率 ¹ (Hz)	1-10Hz	
能量(mJ)	单脉冲	
1064nm	550mJ	800mJ
532nm	250mJ	400mJ
能量稳定性(%)		
1064nm	1%	
532nm	2%	
功率漂移 ² (%)		
1064nm	2%	
532nm	3%	
半峰值脉宽 ³ (ns)	~6	
光斑尺寸(mm)	~8	
光束空间分布	平顶光束	
极性	线性	

一般特性

电源输入	220 VAC ±5% 50-60Hz
能量损耗	<0.5kW (600mJ@10Hz)
工作条件	温度 20-35℃ 湿度<60%

备注:
1.所有特性在 1064nm 和 10Hz 重复频率下测得除非另有标注。
2 保持室温变化小于3℃ 8 小时的平均值。
3.峰值功率的一半对应的脉宽。



中国
卓镭激光技术有限公司
北京市顺义区安平北街8号院博润中心16号楼
邮编: 101318
电话: +86 010-60401920 传真: +86 010-60401720 邮箱: sales@gracelaser.com
www.gracelaser.com

